

Catálogo de productos

circleg

Circleg One



Circleg AG
Rautstrasse 30
8047 Zúrich, Suiza

www.circleg.world
sales@circleg.world

CAT01-ES V07 REV00
26-07-09

Catálogo de productos

Libertad de movimiento para todos



Tabla de contenidos

¡Le damos la bienvenida al mundo de Circleg!	7
Circleg One Rodilla Policéntrica	8
Circleg One Pie Dinámico	12
Circleg One Kit de Pílon	16
Circleg One Cubierta Cosmética Transfemoral	20
Circleg One Cubierta Cosmética Transtibial	24
Cómo hacer un pedido	26





¡Le damos la bienvenida al mundo de Circleg!

El sistema protésico Circleg es una solución modular de alta calidad para personas amputadas de miembro inferior, tanto transfemorales como transtibiales, que combina rendimiento de nivel clínico, durabilidad comprobada y eficiencia operativa. Desarrollados para entornos exigentes y poblaciones de pacientes diversas, los componentes Circleg permiten adaptaciones exitosas en una amplia gama de niveles de actividad, manteniendo al mismo tiempo la simplicidad en la práctica clínica.

Su arquitectura modular permite que las clínicas atiendan a más pacientes con menos componentes. Gracias al ajuste de tamaño, la compatibilidad bilateral y las piezas intercambiables, Circleg reduce significativamente los requisitos de inventario, simplifica los procesos de adaptación y disminuye el costo total de propiedad sin comprometer los resultados clínicos.

Diseñados en Suiza y validados mediante pruebas internacionales y uso en condiciones reales, los componentes Circleg cuentan con marcado **CE**, se desarrollan bajo un sistema de gestión de calidad certificado **ISO 13485** y son probados conforme a la norma **ISO 10328**.


¡Nos complace darle la bienvenida a la familia Circleg! Nuestros componentes pueden solicitarse directamente a través de nuestro portal de pedidos en línea, por correo electrónico a sales@circleg.world o a través de su distribuidor regional de Circleg.

¿Desea una presentación personalizada? Escanee el código QR y complete sus datos.



Circleg One Rodilla Policéntrica

PK1

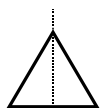

comodidad
Gran estabilidad



nivel de actividad
Cobertura K1 - K3



durabilidad
Diseño robusto

Estabilidad y confort

El diseño único de la Rodilla policéntrica de Circleg proporciona la alta estabilidad requerida por personas con movilidad reducida y satisface las necesidades de los usuarios activos. Ofrece un alto nivel de estabilidad gracias a su golpe de talón y la mayor distancia del suelo durante la fase de balanceo. Incluye un resorte de extensión asistida y un amortiguador de flexión para optimizar el consumo de energía y el ciclo de marcha. La rodilla permite una flexión de hasta 150°. El mecanismo cuenta con una cubierta de rodilla que lo protege contra el polvo y la suciedad, a la vez que crea una forma estética y natural cuando se está sentado.

Datos técnicos

Nivel de actividad	K1, K2, K3
Conexión distal	Adaptador piramidal macho
Conexión proximal	Adaptador piramidal macho
Ángulo de flexión de la rodilla	150°
Altura del componente (mm)	150
Peso del componente (g)	870
Materiales	Estructura principal: poliamida de alto rendimiento reforzada con fibra de vidrio Elementos amortiguadores: elastómero de alta calidad Ejes, tornillos, adaptadores y resortes: acero inoxidable duradero
Peso corporal máximo (kg)	P5 - 110kg
Nivel de amputación	Transfemoral

La Rodilla policéntrica te permite vivir una vida activa e independiente.



Con la rodilla siempre tendrá un apoyo estable, incluso en terrenos desiguales o desafiantes.



¡Ángulo de flexión de la rodilla de 150°!


Circleg One

Pie dinámico


F1-S-KIT
F1-M-KIT
F1-L-KIT



comodidad
Marcha dinámica

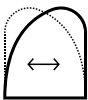

flexibilidad
Diseño bilateral

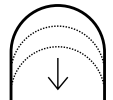

tamaño
Ajustabilidad

Energía y durabilidad


El Pie dinámico de Circleg está diseñado para usuarios activos y menos activos, ofreciendo estabilidad, comodidad y retorno de energía. Su diseño ajustable cubre una amplia gama de tamaños de pie y pesos corporales. Fabricado con plástico de alto rendimiento y una fibra de vidrio ligera pero duradera, garantiza un vuelco suave y una sensación natural. La cubierta universal lo protege contra la humedad y la suciedad a la vez que se adapta perfectamente para el lado izquierdo o derecho. Disponible en S, M y L.

Datos técnicos

Nivel de actividad	K1, K2, K3		
Conexión	Adaptador piramidal macho		
Lado	Izquierdo y derecho		
Nivel de amputación	Transfemoral y transtibial		
Materiales	Cuerpo: polipropileno reforzado con fibra de vidrio (las fibras del pie están altamente alineadas en la dirección de la carga)		
	Cubiertas para los pies y plantilla: poliuretano		
	Adaptador para el pie: acero inoxidable		
	Pie S	Pie M	Pie L
Tamaño (cm)	21-24	24-27	27-30
Peso corporal máximo	P3 - 70kg	P4 - 90kg	P5 - 110kg
Peso del componente (g)	915	1030	1124
Altura del componente (mm)	200	200	200



Los tamaños están indicados en el talón y los dedos

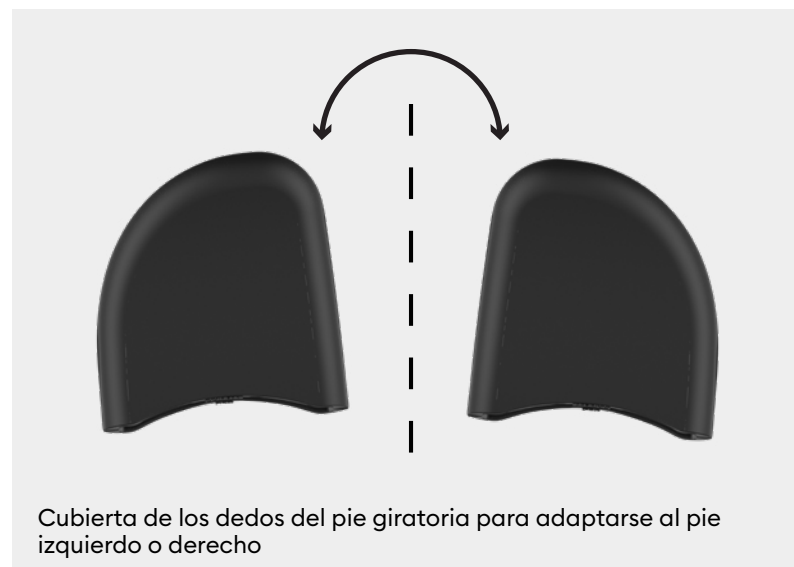

Circleg One

Kit de pilón

PS1-KIT



tamaño
Ajustabilidad

Modularidad y adaptabilidad

El Kit de pilón incluye un pilón de aluminio y dos adaptadores piramidales hembra de acero inoxidable; uno fijo y otro con abrazadera. La longitud máxima total es de 250 mm y el pilón se puede cortar para adaptarse a las diferentes necesidades de los usuarios. Está diseñado para un peso corporal máximo de 110 kg.

Datos técnicos

Nivel de actividad	K1, K2, K3
Conexión distal	Adaptador piramidal hembra
Conexión proximal	Adaptador piramidal hembra
Longitud (mm)	250 (ajustable)
Diametro (mm)	30
Materiales	Aluminio y acero inoxidable
Peso corporal máximo (kg)	P5 - 110kg
Nivel de amputación	Transfemoral y transtibial

**‘Ahora me siento muy estable.
La sensación de seguridad es
increíble.’**

Júnior



**‘Este sistema es altamente
innovador y fácil de usar. El diseño
bilateral, la variedad de tallas y las
opciones de ajuste aportan un valor
especialmente relevante para las
clínicas.’**

Leandro, protésico en CPO

Circleg One

Funda Cosmética Transfemoral



CC1-TF-SM-KIT
CC1-TF-ML-KIT



Ligera y personalizable

La Cubierta Cosmética de Circleg está diseñada para personas con amputación transfemoral, y confiere a los productos de Circleg ese aspecto único. La cubierta confiere un aspecto natural a la pierna y ofrece la máxima protección para la prótesis. El material ligero se puede ajustar en longitud y forma para adaptarse a las necesidades de cada usuario. La cubierta sirve como base ideal para fundas personalizadas de cuero o tela. El sencillo sistema de abrazadera permite un ajuste rápido, reduciendo el tiempo de acabado cosmético.

Datos técnicos


	TF S/M	TF M/L
Altura del cuerpo (cm)	150-170	170-190
Peso del componente (g)	129	151
Longitud del componente (mm)	250-310	310-370
Materiales	Polietileno expandido (EPP)	
Nivel de amputación	Transfemoral	



comodidad
Extremadamente liviano



tamaño
Ajustabilidad

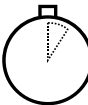

adaptación
Ajuste rápido



La Cubierta Cosmética se puede marcar y acortar a la longitud necesaria con una sierra o cuchillo de corte.

Si fuera necesario, la forma de la Cubierta Cosmética puede adaptarse fácilmente utilizando un cuchillo de corte o papel de lija.



La Cubierta Cosmética encaja en el Kit de pilón, lo que hace que el ajuste sea rápido y fácil.

Circleg One

Funda Cosmética Transtibial

CC1-TT-KIT



Ligera y personalizable

La Cubierta Cosmética de Circleg está diseñada para personas con amputación transtibial, y confiere a los productos de Circleg ese aspecto único. La cubierta confiere un aspecto natural a la pierna y ofrece la máxima protección para la prótesis. El material ligero se puede ajustar en longitud y forma para adaptarse a las necesidades de cada usuario. La cubierta sirve como base ideal para fundas personalizadas de cuero o tela.

Datos técnicos


Longitud del componente (mm)	250-310
Peso del componente (g)	127
Altura del cuerpo (cm)	150-190
Materiales	Polietileno expandido (EPP)
Nivel de amputación	Transtibial



comodidad
Extremadamente liviano



tamaño
Ajustabilidad

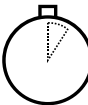

adaptación
Ajuste rápido

Cómo hacer un pedido

¡Estamos encantados de darle la bienvenida a la familia Circleg!
Para pedir los componentes deseados, visite la página de pedido en nuestro sitio web o contacte con nosotros por correo electrónico.



circleg.world/order



sales@circleg.world



**Reserva una
demostración
gratuita**



PK1



PS1-KIT



CC1-TT-KIT



CC1-TF-SM-KIT



CC1-TF-ML-KIT



F1-S-KIT



F1-M-KIT



F1-L-KIT

**Síguenos en redes sociales
@circleg.latam**

